

# MANIPULADOR UTERINO

**CÓDIGO: MAUT60**

**MARCA PETERS SURGICAL**

**PROCEDENCIA: FRANCIA**

Dispositivo médico desechable exclusivamente para uso en histerectomía total. El manipulador está dirigido a exponer el útero y permite facilitar la presentación del fondo vaginal durante la cirugía ginecológica.

## Características

- Presenta un diámetro de 7 mm y una longitud de 90 mm.
- Brinda una presentación óptima del cuello uterino.
- Presenta en forma independiente un balón extraíble para mantener el neumoperitoneo.
- Permite una fácil movilidad uterina en todas las direcciones.
- Peso ligero para los operadores (180 g).
- Totalmente ensamblado para su uso inmediato.

## Componentes



- Bujía dilatadora: Permite calibrar el canal cervical y estimar la longitud de la cavidad uterina.
- Manipulador uterino: Formado por un tubo metálico que en un extremo posee una punta rosca y en el otro extremo el mango para maniobrar.
- Tapón y balón de sellado: garantiza el neumoperitoneo desde el inicio de la ablación uterina.
- Una valva guía para corte: permite realizar libremente los movimientos de traslación, rotación y un corte preciso.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en una caja con 10 unidades estériles.

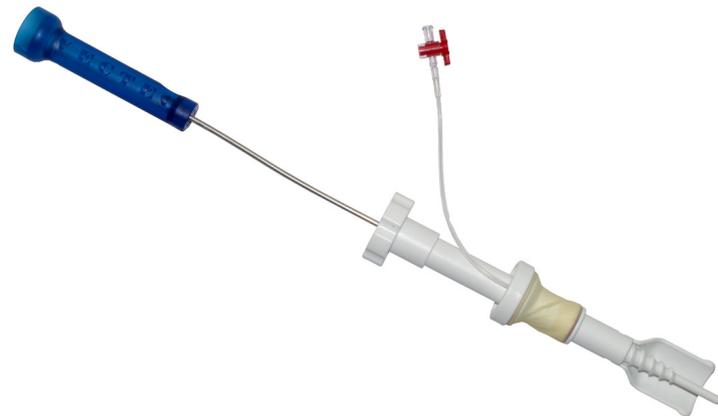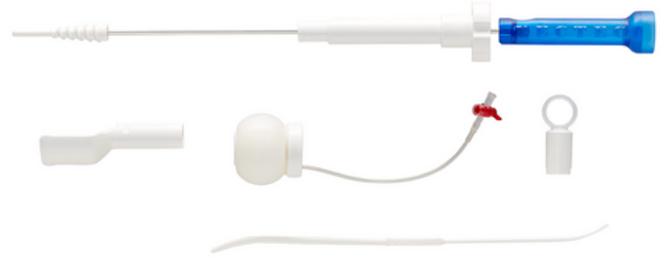

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno con envase indemne.

## Certificaciones

- ISO 13485:2003.
- ISO 13485:2012.
- EC.