
	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>CLEO 90</b>	

<b>Individualización del Producto</b>	
<b>Descripción</b>	Dispositivo desechable de infusión subcutánea continua de fármacos, mediante una bomba externa, permitiendo una infusión simple, rápida, cómoda, segura y eficiente.
<b>Código</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21-7220-24: Set subcutáneo CLEO de 6 mm.</li> <li>• 21-7230-24: Set subcutáneo CLEO de 9 mm</li> </ul>
<b>Marca</b>	SMITHS MEDICAL
<b>Procedencia</b>	E.E.U.U

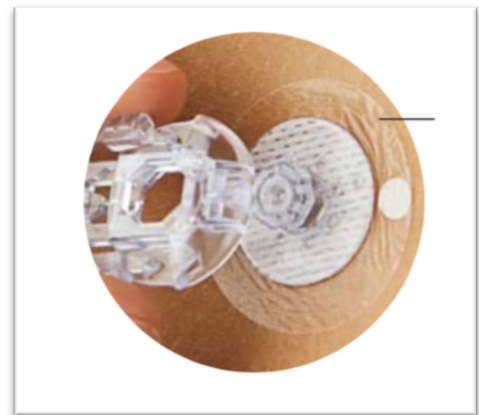


<b>Descripción del Producto</b>	
<b>Indicaciones de Uso</b>	Dispositivo de infusión subcutánea desechable diseñado para la infusión de una variedad de medicamentos, incluyendo la insulina
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brinda seguridad, al presentar la aguja incluida dentro del dispositivo, reduciendo las lesiones accidentales.</li> <li>• Consta de un aplicador que contiene una zona adhesiva con cánula, aguja y una línea de infusión separada para conexión al área deseada.</li> <li>• Después de la inserción de la aguja y de la cánula, el aplicador retrae automáticamente la aguja para protegerla.</li> <li>• Inserción rápida y con una sola mano.</li> <li>• El equipo de infusión puede ser usado con conectores Luer estándar, lo que significa que puede utilizarse con cualquier bomba que tenga un conector Luer.</li> <li>• Longitud de cánula 6 mm y 9 mm.</li> <li>• Longitud del tubo 60 cm.</li> </ul>

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>CLEO 90</b>	

<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 13485:2003</li> <li>• ISO 13485: 2012</li> <li>• FDA</li> </ul>
<b>Esterilización</b>	Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno. Libre de Látex
<b>Empaque</b>	El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.
<b>Almacenamiento</b>	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)