
	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>INSUFLON</b>	

<b>Individualización del Producto</b>	
<b>Descripción</b>	Cánula que se inserta en el tejido subcutáneo del cuerpo en un ángulo de 20 a 45°. Después de retirar la inserción de la aguja, la cánula permanece en el cuerpo, por lo que es posible inyectar el medicamento a través de la membrana, sin punción adicional, evitando el dolor de la inyección.
<b>Código</b>	98-000-2612
<b>Marca</b>	CONVATEC
<b>Procedencia</b>	Dinamarca

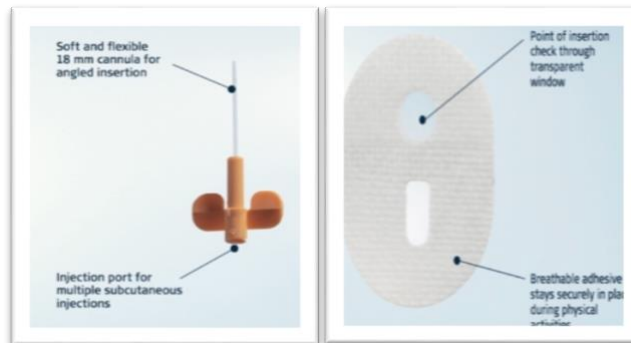

<b>Descripción del Producto</b>	
<b>Indicaciones</b>	Insuflon esta indicado para la infusión subcutánea de insulina, analgésicos en bolos y para la administración de otros fármacos por vía subcutánea.
<b>Contraindicaciones</b>	No debe ser utilizado en combinación con una bomba de infusión y tampoco para la infusión IV, ni de sangre o hemoderivados.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cánula subcutánea flexible blanda de 27 G (18 mm/0.71 pulgadas).</li> <li>• Inserción angulada flexible, diseñada para gente con una capa delgada de tejido adiposo.</li> <li>• Cánula blanda de INSUFLON, puede permanecer en el cuerpo hasta 3 días a 5 días, dependiendo de la terapia administrada.</li> <li>• Longitud de aguja: 12 mm.</li> <li>• Espacio muerto: 0.00075 ml.</li> </ul>
<b>Biocompatibilidad</b>	Todos los componentes de INSUFLON son biocompatibles y libre de látex
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 13485:2003.</li> <li>• EC.</li> </ul>
<b>Almacenamiento</b>	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
<b>Empaque</b>	El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.
<b>Esterilización</b>	Producto estéril en óxido de etileno.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)