


Individualización del Producto	
Descripción	Set de administración destinado a la administración de fármacos a través de las
	bombas de infusión CADD.
Código	21-7323-24
Marca	SMITHS MEDICAL
Procedencia	E.E.U.U





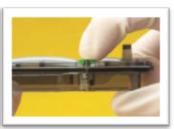

Descripción del Producto		
Características	<ul> <li>Equipo de administración con bandas azules CADD<sup>®</sup> con punzón para bolsa.</li> <li>Presenta un protección frente al flujo libre con detención de flujo, con una función de seguridad integrada ( Cubierta azul) que evita el flujo libre de fluidos.</li> <li>Volumen de Purgado: 2.3 ml.</li> <li>Longitud 198 cm (78 pulgadas).</li> </ul>	
Componentes	<ul> <li>Punzón para bolsa.</li> <li>Mecanismo de detención de flujo, diseñado para evitar la infusión de gravedad no regulada (Flujo libre).</li> <li>Abrazadera y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho.</li> </ul>	
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.	
Empaque	Empaque unitario, libre de látex con TOTM sin DEHP	
Certificaciones	<ul> <li>ISO 9001:2018</li> <li>ISO 13485: 2003</li> <li>ISO 13485: 2012</li> <li>FDA</li> </ul>	
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable apirógeno.	

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 - 22283171